

# Motor de endodoncia Motopex



**Sanhigía**  
THINK SURGICAL

OFICINAS CENTRALES  
C/ Felipe Sanclemente, 6  
Planta -1, local 9-10.  
50001 Zaragoza

CENTRO LOGÍSTICO  
Pol. Ind. Lastra Monegros,  
C/ Beta, parcela B6.  
50177 Bujaraloz (Zaragoza)



## Motor de endodoncia MOTOPEX


El motor de endodoncia sin escobillas Motopex garantiza una máxima eficiencia y un mínimo ruido. Su ángulo ajustable recíprocante (entre 20° y 340°, a intervalos de 10°) reduce el riesgo de rotura y facilita la operación en zonas de difícil acceso. Su rotación suave y continua, así como los bajos niveles de ruido mejoran la experiencia del paciente.

### Movimiento de la punta óptimo

El ángulo recíprocante ajustable, la mayor potencia de este motor, y su par de torsión estable, hacen que la preparación del canal radicular sea más eficaz y

### Diseño ergonómico

El centro de gravedad del motor de endodoncia Motopex se halla situado en la parte delantera del cuerpo, facilitando el manejo. La cabeza supermini de 8mm. de diámetro y una altura de 9,7mm, y el fino cuello de la herramienta brinda una mayor visión durante el proceso endodóntico. Además, el contra-ángulo mejora la comodidad en el acceso a la cavidad bucal.

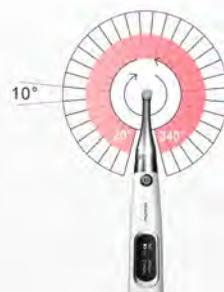

### Detector de ápices incorporado

Se muestra en tiempo real la ubicación dentro del canal radicular. El motor para automáticamente o rota en dirección opuesta tan pronto como la lima llega al tope apical, para prevenir la perforación. Funciones de Auto Star y Auto Stop respectivamente permiten al motor comenzar automáticamente mientras la lima entra en el canal y parar cuando sale.

### Cabezal con rotación 360°

La cabeza supermini del motor Motope puede realizar rotaciones completas de 360° para una comodidad y adaptabilidad superior.



## Motor de endodoncia Motopex

- Cabeza súper mini y cuello delgado
- Rotación precisa
- Funcionamiento silencioso
- Par de torsión constante
- Velocidad ajustable (100-1200rpm)
- Batería de litio 2000mAh

Referencia W-Motopex